
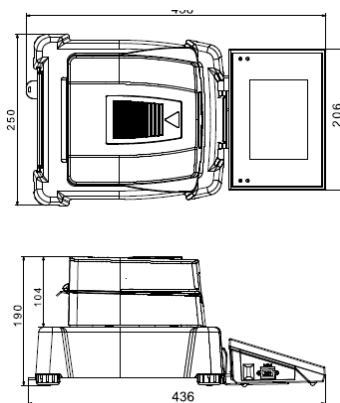


# Анализатор влажности МА.3У

Professional level

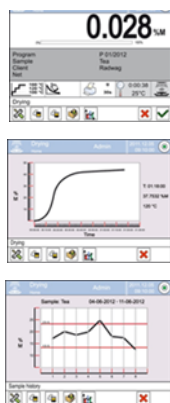

Анализатор влажности является лабораторным измерительным прибором, предназначенным для определения относительного содержания влаги в образцах различных веществ. МА 3У оснащен цветной сенсорной панелью с диагональю 5,7", которая обеспечивает новые возможности работы прибора и графическое представление результатов измерений. Услугам расширенной базы данных, содержащие программируемые режимы сушки, связанной с базой данных образцов. Серия МА 3У обеспечивает печать и экспорт графиков, представленных на его дисплее в файл BMP.

Особенности анализатора влажности серии МА 3У:

- Точность считывания содержания влаги 0,0001%
- Нагрев компонентов: галоген или ИК-излучатель
- Графическое представление результатов сушки, графиков: Ат,% М,% D,% R,
- Сушка профилей: стандартный, плавный, пошаговый, быстро
- Выбор режима: AUTO 1 - 5, ручной, автоматический, время определено
- База данных сушки процедуры: около 1000 записей для каждого типа данных
- База данных образцов
- Интерфейсы: 2 x USB 2.0; 4In / 4out, RS 232, Ethernet 10/100Mbit

Персонализация настроек прибора осуществляется в расширенном профиле пользователей. Уровень управления на основе системы LevelSENSING, Radwag запатентованное решение, которое использует систему электронного уровня. Стандартные и пользовательские распечатки позволяют для поддержания документация соответствует GLP / GMP требования практически в любом приложении.

Анализатор влажности RADWAG	МА 60.3У	МА 200.3У
Наибольший предел взвешивания, НПВ	60 г / 160°C	200 г / 160°C
Цена деления d (дискретность)	0,1 мг / 0,0001%	1 мг / 0,001%
Повторяемость. СКО	≤0,3 мг / 0,05% (2 г)	≤3 мг / 0,05% (2 г)
Линейность	±0,2 мг	±2 мг
Нм ПВ	10 мг / 0,5 г	20 мг / 0,5 г
Диапазон тарирования.	-60 г	-200 г
Юстировка	Внешняя 50g F1	Внешняя 200g F2
Рабочая температура	+15°C ÷ +35°C (max +10°C ÷ +40°C)	
Рабочая влажность	40% ÷ 80%	
Эл. сеть	220 ÷ 240 V AC, 50÷60Hz / лампа IR, 400W	
Время стабилизации	<3,5 сек.	
Размер чаши	Ø90 мм	
Дисплей	Цветной сенсорный (touch) 5,7"	
Интерфейс	2xUSB, RS 232, Ethernet 10/100Mbit, 4Inp/4Out	
Габариты (Г x Ш x В)	436 x 206 x 190 мм	
Габариты упаковки	595 x 395 x 420 мм	
Вес нетто/брутто	6,0 / 10,0 кг	
Гос. Реестр СИ РФ	Нет, Сертификат о калибровке СИ	

## Сертификация



## Режимы и опции



г. Воронеж: +7 (473) 204-53-02  
 г. Краснодар: +7 (861) 203-40-01  
 г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 209-88-94 г.  
 Саратов: +7 (845) 249-63-11  
[www.eltemiks.ru](http://www.eltemiks.ru) | [info@eltemiks.ru](mailto:info@eltemiks.ru)



**ЭЛТЕМИКС**  
ELTEMIKS