

**ЭЛТЕМИКС**  
ELTEMIKS



## Следующее поколение водяных бань Модели 1102 - 1108 / 1112 / 1113

- ① 1102 Водяная баня, 8 л
- ② 1103 Водяная баня, 16 л
- ③ 1104 Водяная баня, 24 л



Поставка без изображенных принадлежностей

### Принадлежности для всех моделей

- Подставка для различных сосудов
- Средство для защиты водяных бань ProAquaTop
- Перфорированная крышка с термостойкими кольцами
- Настраиваемый регулятор уровня воды


### Специальные решения по запросу.

### Технические характеристики

- Температурный диапазон от +5 °C выше комнатной температуры (10 °C для типов 1112 / 1113) до 100 °C (стадия кипения) с временным постоянством температуры  $\pm 0,1$  K при 50 °C.

### Дополнительные функции - проверенные технические решения

- Большой цветной графический интерфейс пользователя
- Три специальные функции таймера
- Базовое оснащение с крышкой из нержавеющей стали и встроенным сливным краном

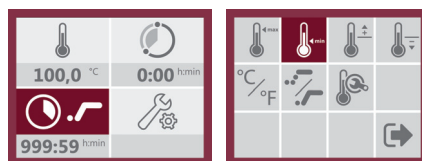

### Новый регулятор предлагает множество дополнительных функций и усовершенствований:

- Большой контрастный цветной TFT-дисплей
- Управление в режиме меню
- Расширенные оптические и звуковые сигналы тревоги для большей безопасности
- Регулировка температуры в зависимости от процесса
- Индикация температуры в °C или °F

Имеется семь моделей новых инкубационных и инактивационных ванн с пятью различными объемами от 8 до 41 л. Типы 1112 и 1113 с системой циркуляции.

### Наши проверенные решения:

- Внутренняя камера из нержавеющей стали
- Непосредственное термостатирование для обеспечения короткого времени нагрева
- Два отдельных предохранителя от перегрева
- Конструкция крышки предотвращает стекание конденсата на образцы
- Широкий ассортимент принадлежностей
- Прежние принадлежности совместимы с новыми водяными банями

№ для заказа	Объем л	Внутренние размеры Ш x Г x В, мм	Наружные размеры Ш x Г x В, мм	Вес кг	Нагрев кВт
① 1102	8	245 x 200 x 165	340 x 395 x 275	11,0	1,0
② 1103	16	400 x 245 x 165	500 x 440 x 275	15,2	1,5
③ 1104	24	600 x 245 x 165	700 x 440 x 275	22,0	1,5
1105	41	410 x 296 x 335	510 x 490 x 465	26,4	1,5
1108	22	400 x 245 x 225	500 x 440 x 345	17,4	1,5
1112	8	245 x 200 x 165	340 x 395 x 345	12,9	1,0
1113	16	400 x 245 x 165	500 x 440 x 345	17,7	1,5

- Электропитание 230 В  $\pm 10$  %, 50 ... 60 Гц. Другие значения напряжения по запросу.

[www.eltemiks.ru](http://www.eltemiks.ru)



MORE THAN 50 YEARS  
OF GERMAN QUALITY