




designed for scientists

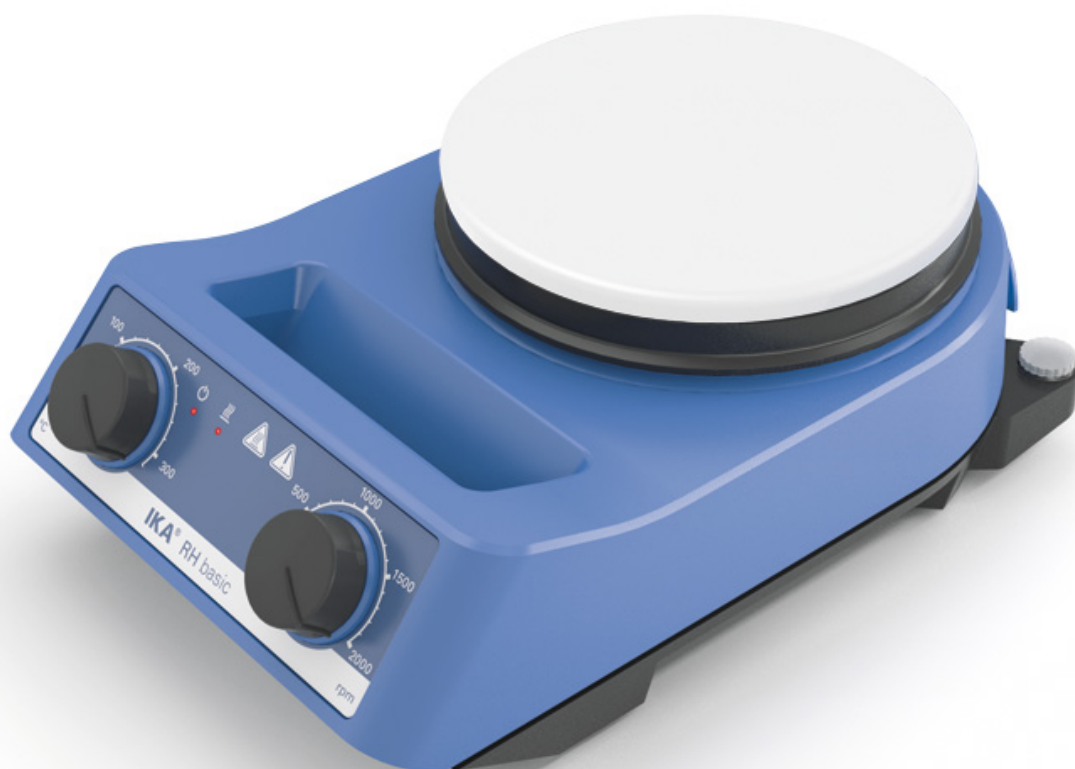

RH basic white

/// Технический паспорт

Вновь разработанная недорогая магнитная мешалка с подогревом. Разъем в соответствии с DIN 12878 для подключения электронного контактного термометра, например ETS-D5. Возможен контроль температуры с высокой степенью точности благодаря датчику, размещаемому непосредственно в среде. Высокая мощность нагрева 600 Вт и белая керамическая нагревательная поверхность обеспечивают быстрый нагрев и очень высокую химическую стойкость. Регулируемая температура безопасности от 100 до 360°C.

- Плавный пуск двигателя перемешивания
- Резьбовое отверстие М 10 для установки штатива



designed for scientists

- Сильное магнитное поле и широкий диапазон скоростей для объемов перемешивания до 15 литров



designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H ₂ O) [l]	15
Производимая мощность привода [W]	2
Направление вращения	лево
Отображение заданной скорости	Шкала
Контроль диапазона скоростей	Кнопка управления
Диапазон вращающего момента [rpm]	100 - 2000
длина перемешивающего стержня [mm]	20 - 80
Саморазогрев нагревательной плитки (Т(комн.): 22°C/длительность:1 час) [K]	+28
Мощность нагрева [W]	600
Отображение заданной температуры	Шкала
Единица измерения температуры	° C
Диапазон нагревания температур [°C]	50 - 320
Контроль нагрева	Шкала
Диапазон нагревания температуры [°C]	0 - 320
Разъем для подключения контактного термометра	ETS-D5
Характеристики в среде с датчиком температуры	1 л M50 масло на H1500
Скорость нагрева среды [K/min]	6
Регулируемый безопасный нагрев [°C]	100 - 360
Нагревательная пластина материал	Техническая эмаль
Нагревательная пластина размер [mm]	Ø 135
Размеры [mm]	160 x 100 x 250
Вес [kg]	2.8
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Напряжение [V]	230
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	620