

SV-A

серия



ЭЛТЕМИКС
ELTEMIKS

**ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНО
ИЗМЕРЯТЬ ОБРАЗЦЫ
РАЗМЕРОМ 2МЛ!**



- Сенсорное устройство может быть отсоединено, что позволяет расширить область применения прибора.



- В комплект поставки входит портативный футляр для переноски.



- Идеально подходит для измерения вязкости крови



A&D
A&D Company, Limited
www.eltemiks.ru

...Качество основной критерий

SV-A серия



- Измерение образцов размером 2мл (SV-1A)
- Предметный столик X-Y-Z для правильной установки образца
- Антикоррозионные титановые сенсорные пластины
- Стандартное программное обеспечение WinCT-V software, последовательный USB конвертер

Спецификация	SV-1A	SV-10A
Метод измерения	Синусоидальный вибровязкозиметр, использующий метод камертонной вибрации; частота вибрации 30 Гц	
Диапазон измерения вязкости	0.3 – 1000 мПа·с *	0.3 – 10000 мПа·с *
Точность измерения	Повторяемость 1% (станд. отклонение, 20~30°C, без конденсации)	
Мин. размер образца	2мл~	10мл~
Измерение температур	0 – 160°C/0.1°C	
Питание	Сетевой адаптер (прибл. 14 ВА)	
Стандартная комплектация	Кейс с прибором, стойка с предметным столиком X-Y-Z, адаптер, соединительный кабель, диск с ПО, кабель RS-232C, USB кабель	
	Комплект AX-SV-55	Комплект AX-SV-54

Опции

- AX-SV-51 Комплект стойки с предметным столиком X-Y-Z
- AX-SV-52 Предметный столик X-Y-Z
- AX-SV-53 Комплект программного обеспечения с последовательным USB конвертером
- AX-SV-54 Комплект чашек для образца
45мл x 5 шт., 10мл с крышкой x 5 шт., поликарбонат
13мл x 2 шт., стекло
Держатель стеклянной чашки x 1 шт.
Водяная рубашка x 1 шт.
- AX-SV-55* Комплект чашек
2мл с колпачком x 10шт., поликарбонат
2мл x 10шт., стекло, 45мл x 5 шт.
Держатель чашки (для чашки ёмкостью 2 мл) x 5 шт., поликарбонат
Штатив для чашек (ёмкостью 2 мл) x 1 шт.
Водяная рубашка 1 шт.
- AX-SV-56* Держатель чашки для образца (для чашки 2 мл) x 5шт., прозр./черный
- AX-SV-57* Штатив для чашек (для чашек ёмкостью 2 мл) x 2 шт.
- AX-SV-58* Чашка для образца (2мл, с колпачком) x 100 шт., поликарбонат
- AX-SV-59* Чашка для образца (2мл) x 5 шт., стекло
Штатив для чашек (для чашек ёмкостью 2 мл) x 1 шт.
- * Только для SV-1A




AX-SV-52



AX-SV-54



AX-SV-55

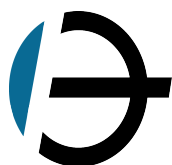

ЭЛТЕМИКС
ELTEMIKS

www.eltemiks.ru

Ваш дилер